

**ISASAN** srl Rovello Porro (COMO)  
info@isasan.com www.isasan.com

Ideato e sviluppato  
in Australia per la sicurezza  
negli sport da contatto.



**MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.**  
- designers and manufacturers of innovative dental appliances -  
EUROPE • USA • AUSTRALIA

Massima protezione per denti  
frontali e articolazione  
temporomandibolare

Bocchette per respirazione normale

Adattamento confortevole e sicuro.

Vera protezione con STC™.

GENUINE  
**SHOCK  
TRANSFER  
CORE  
PROTECTION**

Il rivestimento morbido smorza l'impatto.  
L'STC™ sposta le forze dai denti frontali ai molari.

Disponibile  
anche con  
**aggancio**  
per il casco.

**POWRGARD EXTREME**  
è disponibile con arcata  
singola come STEALTH

Protegge entrambe  
le arcate  
Sistema M.O.R.A. per migliorare  
le prestazioni

# POWRGARD EXTREME™

STC™ - per sport da contatto

Dai 12 anni

**PARADENTI  
a doppia arcata**

PROTEZIONE E PRESTAZIONI  
COME UN BITE PERSONALIZZATO

Consigliato dalla SOCIETA' ITALIANA di TRAUMATOLOGIA DENTALE

**POWRGARD EXTREME™**  
 con **TRASFERIMENTO D'IMPATTO STC™**  
 ...massima protezione,  
 massime prestazioni.

- ① Esterno morbido: si adatta perfettamente a denti e bocca e assorbe l'impatto.
- ② STC™ interno per smorzare l'impatto sui denti anteriori
- ③ Base di 5 mm a cuscinetto d'aria per proteggere l'articolazione temporo-mandibolare
- ④ Lamella linguale per un corretto posizionamento della lingua
- ⑤ Ampi fori per una respirazione normale.

④ Sezione trasversale che mostra l'alloggiamento per i denti e l'STC™





**Sistema M.O.R.A. per le massime prestazioni**

Come i bite su misura realizzati per gli atleti professionisti, POWRGARD EXTREME fa parte dei dispositivi "M.O.R.A." (Mandibular Orthopaedic Repositioning Appliance), in grado di mantenere costantemente l'atleta al 100% del potenziale, semplicemente ottimizzando la posizione mandibolare.

Questo equivale ad aumentare la forza fisica fino al 30%.

**EXTREME™ Istruzioni per la personalizzazione**

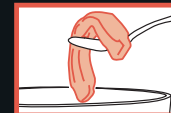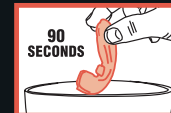

**IMPORTANTE:** durante la procedura "scalda e mordi",

POWRGARD EXTREME deve essere adeguatamente riscaldato.

La procedura richiede solo **3 minuti** ed è più semplice se effettuata davanti allo specchio. Si suggerisce di eseguire una prova. Preparare acqua bollente in una scodella, un cucchiaio, uno specchio ed un contasecondi.

1. Immergere EXTREME in acqua bollente per **90 secondi** con la lamella linguale rivolta verso il basso.
2. Rimuovere dall'acqua servendosi di un cucchiaio.
3. Raffreddare sotto acqua corrente per **1 solo secondo** per abbassare la temperatura e passare rapidamente al passaggio successivo.
4. Davanti allo specchio assicurarsi che il dispositivo sia ben centrato in bocca e procedere immediatamente al passaggio successivo.
5. Posizionare velocemente EXTREME sull'arcata superiore (lamella linguale in alto) e **premere con forza prima contro i molari e poi contro i denti anteriori.**
6. Portare i denti inferiori nella base di EXTREME, allineandoli con i denti superiori.
7. Appoggiare la punta della lingua sulla lamella linguale, chiudere la bocca e stringere i denti su EXTREME. Succhiare con forza aspirando tutta l'aria e premere con le dita gli angoli di EXTREME facendo aderire bene labbra e guance per almeno **20 secondi.**

Rimuovere dalla bocca e raffreddare sotto acqua corrente per 30 secondi.

Riprovare per verificarne l'adattamento. Ripetere la procedura qualora EXTREME non avesse raggiunto la forma desiderata (utilizzare sempre acqua bollente). EXTREME può essere rimodellato più volte.

**CONSERVAZIONE E PULIZIA**

- Rimuovere sempre con delicatezza - Risciacquare con acqua fredda o tiepida prima di riporre il prodotto - Pulire con spazzolino e dentifricio - Riporre nel suo contenitore.