

Ideato e sviluppato
in Australia per la sicurezza
negli sport da contatto.



MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.
- designers and manufacturers of innovative dental appliances -
EUROPE • USA • AUSTRALIA

Disponibile
anche con
aggancio
per il casco.

Protezione efficace per
denti anteriori e mascelle.
Dispositivo M.O.R.A. per le
massime prestazioni sportive.

Adatto anche in caso di denti
affollati o male allineati.

ISASAN srl Rovello Porro (COMO)
info@isasan.com www.isasan.com

Garanzia di protezione

POWRGARD UNIVERS™

per tutti gli sportivi Dagli 11 anni

PARADENTI ad arcata singola

PROTEZIONE E PRESTAZIONI
COME UN BITE PERSONALIZZATO

Consigliato dalla SOCIETA' ITALIANA di TRAUMATOLOGIA DENTALE

POWRGARD UNIVERSE™

...per proteggere tutti gli atleti negli sport da contatto.

- ① Alloggiamento dentale adatto a tutte le arcate e facilmente personalizzabile.
- ② Lamella linguale per un corretto posizionamento della lingua
- ③ Base brevettata a cuscinetto d'aria per proteggere l'articolazione temporo-mandibolare




Sezione trasversale che mostra l'alloggiamento per i denti superiori, lamella linguale e base a cuscinetto d'aria per la protezione articolare



Sistema M.O.R.A. per le massime prestazioni

Come i bite su misura realizzati per gli atleti professionisti, POWRGARD UNIVERSE fa parte dei dispositivi "M.O.R.A." (Mandibular Orthopaedic Repositioning Appliance), in grado di mantenere costantemente l'atleta al 100% del potenziale, semplicemente ottimizzando la posizione mandibolare. Questo equivale ad aumentare la forza fisica fino al 30%.

UNIVERS™ Istruzioni per la personalizzazione

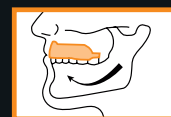

La procedura richiede solo **2 minuti**

ed è più semplice se effettuata davanti allo specchio.

Si suggerisce di eseguire una prova.

Preparare acqua bollente in una scodella, un cucchiaio, uno specchio ed un contasecondi.

1. Immergere UNIVERSE in acqua bollente per **45 secondi** con la lamella linguale rivolta verso il basso.
2. Rimuovere dall'acqua servendosi di un cucchiaio.
3. Davanti allo specchio, mettere UNIVERSE sull'arcata superiore verificando che sia ben centrato in bocca
4. Inserire i denti inferiori nella base di UNIVERSE e chiudere **delicatamente** la bocca.
5. Fare aderire bene UNIVERSE a denti e gengive premendo con le dita labbra e guance.
6. Appoggiare la lingua sulla lamella linguale e aspirare con forza, per **20 secondi**.
7. Rimuovere delicatamente UNIVERSE e raffreddare sotto acqua corrente per **10 secondi**

Riprovare UNIVERSE per verificarne l'adattamento.

Ripetere la procedura se la tenuta di UNIVERSE dovesse allentarsi. UNIVERSE può essere rimodellato più volte.

CONSERVAZIONE E PULIZIA

- Rimuovere sempre con delicatezza - Risciacquare con acqua fredda o tiepida prima di riporre il prodotto - Pulire con spazzolino e dentifricio - Riporre nel suo contenitore.